




StimuLITE®

VENTILERANDE KIL

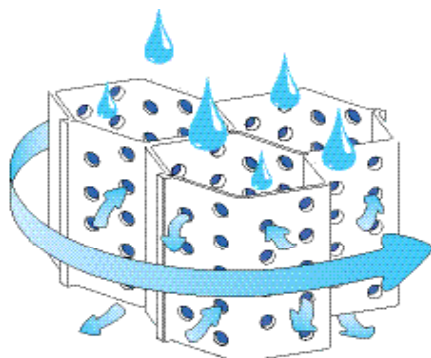

ANPASSNINGSBAR POSITIONERINGSKIL

StimuLITE® positioneringskil är en kil tillverkad i 100 % TPU i bikakestruktur. Det är en fast kil som kan användas för positionering. Den fördelar trycket och är helt ventilerad. Den kan användas på flera olika sätt till exempel:

- Placeras under rullstolsdynan i framkant för att minska sittvinkeln.
- Placeras under rullstolsdynan i sidan för att korrigera sittställning i sidled.
- Placeras under rullstolsdynan bak för att öka sittvinkeln.

StimuLITE® kil är mycket stabil och ventilerad, och väger mindre än 100 gram. Den kommer färdig med ett Cordura™ överdrag med kardborre för att passa ihop med överdrage, men kan lika gärna användas utan överdraget. Man kan anpassa den genom att skära i kanterna. Både kil och överdrag är tvättbara i 40° i maskin.

StimuLITE® Ventilerende Kil		
Art.nr.	Storlek	Höjd
KIL3S	36 x 27 cm	2,5 cm
KIL5S	36 x 27 cm	5 cm
KIL3L	41 x 27 cm	2,5 cm
KIL5L	41 x 27 cm	5 cm



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Alla StimuLITE® produkter är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 och CE-märkta.



SVENSK MILJÖBAS



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
031-521895

goran@rehabshop.com
www.rehabshop.com